




26英寸全高清宽屏手术监视器，可完整再现手术影像。

高清手术监视器

该监视器采用具有节能LED背光的LCD面板，亮度为700 cd/m²，对比度为1400:1。它以全高清分辨率（1920×1080像素）显示，并可完整再现用于内窥镜检查 and 显微镜操作的高清手术影像。

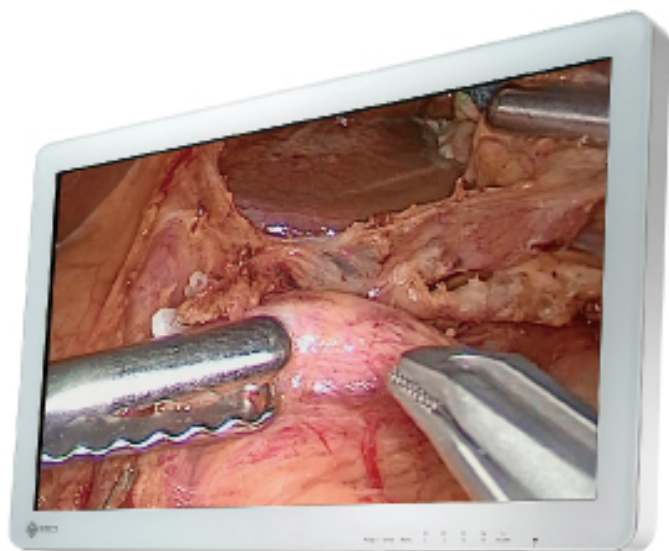

全平面设计, 安全卫生

手术室包含各种医疗器械，这些设备都是根据正在进行的手术类型进行排列的。出于安全考虑，EIZO的手术监视器采用圆角设计。此外，正面覆盖一层完全平坦的防尘防水保护玻璃，防护等级达IP45（整体防护等级为IP32）。

此外，通过附加的电缆盖，电缆能够整齐地存放于视线之外的地方，从而提高手术室的安全性和卫生性。



CuratOR® EX2620

从任何角度均可舒适查看

该监视器具有178度的视角, 可以从不同方向查看图像, 对比度的变化很小。

防损坏保护面板

监视器上覆盖有保护面板, 帮助保护LCD屏幕免受冲击、划损和脏污。

干净且安静的无风扇设计

该监视器采用卓越的散热技术, 使得其无需风扇也可保持冷却。如此使监视器显得极安静, 不会扰乱手术室的气流。此外, 由于不存在通风孔, 清洁起来轻而易举, 因此能够轻松地对该监视器进行手术消毒。

根据您的需要旋转或镜像图像

无论手术摄像头的方向如何, 您都可以将显示的图像旋转180度或镜像以找到完美的手术视图。适用于使图像与周围助手和外科医生的站点线相匹配, 从而提高手术室的便利性。

可在一个屏幕上查看多个信号

可通过使用PoP (画外画) 功能在一个监视器屏幕上同时查看两个单独的信号源。另外, 可通过使用PiP (画中画) 在主信号监视器上方的角落中显示第二个信号。使用PoP或PiP时, 两个监视器的大小和位置均可调整。该功能在需要同时查看若干图像 (如多个模式) 时非常有用。

能够独立地调整屏幕

在同一屏幕上并排显示两个信号源时, 能够在不干扰其他图像的情况下调整每个图像的显示模式 (伽玛值1.8-2.6或DICOM预设模式)。这对多模式用途而言是完美的选择, 其中内窥镜、CT和MRI图像能够准确地显示在同一监视器上。

独立旋转和镜像

当同时显示两个信号时, 每个图像均可独立地旋转180度或镜像。


支持各种输入/输出信号

监视器支持用于连接至各类模式设备的各种视频输入/输出信号。此外, GPI和RS-232C允许您从外部控制输入信号和屏幕旋转, 以便结合所用手术设备的设置更改图像的显示。


规格

面板	类型	彩色 (IPS)
	背光	LED
	尺寸	66.1 cm / 26.0"
	分辨率	1920 x 1080 (长宽比16: 9)
	显示尺寸 (HxV)	576 x 324 mm
	像素间距	0.300 x 0.300 mm
	显示色彩	10位色彩 (SDI) : 10.7亿 (最大) 种颜色 8位颜色: 1677万种颜色
	可视角度 (H/V, 标准)	178° / 178°
	亮度 (标准)	700 cd/m ²
	对比度 (标准)	1400:1
视频信号	响应时间 (标准)	18 ms (开 / 关)
	输入端口	BNC (3G-SDI) x 1、BNC (复合型) x1 、S-Video x 1、DVI-D x 2 (支持HDCP) 、D-Sub 15针 (微型) x 1
	输出端口	BNC (3G-SDI) x 1、BNC (复合型) x 1 、S-Video x 1、DVI-D x 1
	数字扫描频率 (H/V)	15 - 75 kHz / 24 - 60 Hz
	模拟扫描频率 (H/V)	15 - 80 kHz / 24 - 85 Hz
	同步格式	独立、复合、绿色同步
功率	电源要求	AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz
	最大功耗	90 W
特征和功能		遥控 (RS-232C, GPI)
物理规格	净重 (不包括底座)	8.1 kg
	安装孔距 (VESA标准)	100x100 mm, M4, 深度5-9 mm
环境要求	防护等级	IP45 (正面), IP32 (背面)
认证与标准 (有关最新信息, 请联系您所在国家的EIZO 集团公司或经销商。)		CE (Medical Device)、EN60601-1、ANSI / AAMI ES60601-1、CSA C22.2 No. 601-1、IEC60601-1、VCCI-A、FCC-A、 CAN ICES-3 (A)、RCM、RoHS、中国 RoHS、WEEE、CCC、EAC
FDA		I类
随附提供的配件 (可能因国家而异。详情请联系EIZO)		AC电源线、AC适配器、电缆盖、光盘 (PDF安装手册)、使用说明
质保		两年

尺寸 (单位: mm)

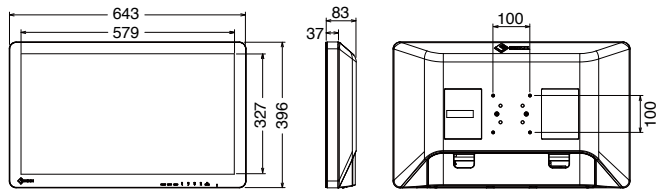

接口

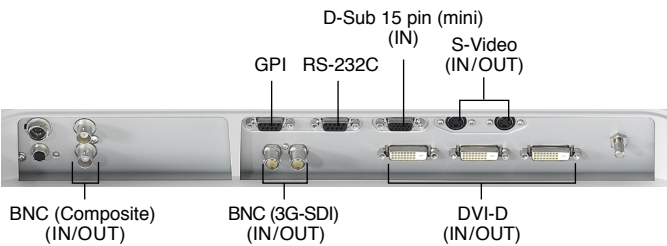

所有产品名称均为其各自所属公司的商标或注册商标。EIZO、EIZO标志和CuratOR均属于EIZO Corporation的注册商标。屏幕图像由静冈癌症中心提供。
规格可能会不时变更, 恕不另行通知。